

SQ.line® KERRISON Knochenstanze

So Clean!


1 | Zerlegen



1 Inneres Griffteil schliessen.



2 Goldenen Riegel vollständig herunterdrücken und den Griff loslassen.

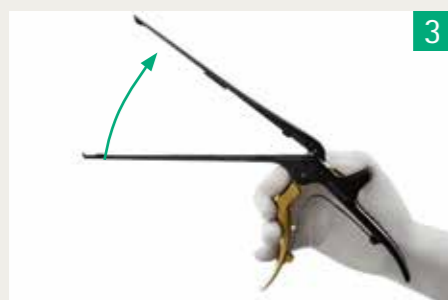

3 Schiebeteil öffnen.

2 | Reinigung



Knochenstanzen zur Reinigung in geöffneter Stellung im Korb platzieren.



Alternativ die Knochenstanzen zur Reinigung im SQ.line® KERRISON Rack (JF125R oder JF126R) platzieren.


3 | Wartung




Die beweglichen Teile (Scharniere, Riegel und die Kontaktfläche des Schiebeteils) sollten mit einem sterilisierbaren und dampfdurchlässigen Öl, wie Sterilit® Pflegeöl (JG598 oder JG600) geschmiert werden.




4 | Zusammensetzen

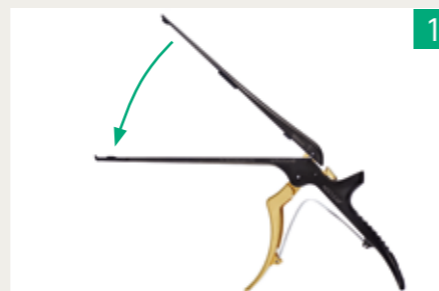

1 Schiebeteil schliessen.

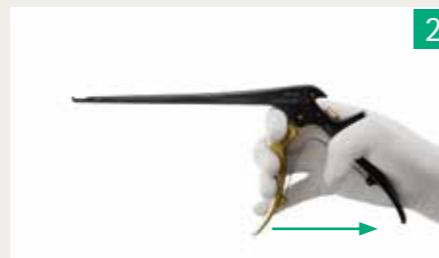

2 Inneres Griffteil schließen und loslassen.

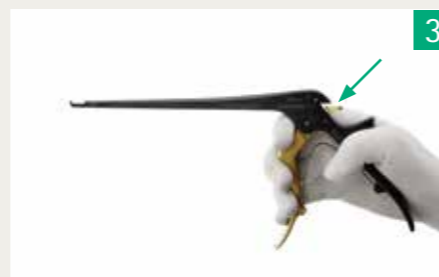

3 Der goldene Riegel schliesst sich von selbst.

5 | Funktionsprüfung



Prüfen, dass die Knochenstanze ordnungsgemäss funktioniert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Aesculap Service Center.

☎ Telefon 058 258 76 71

✉ repair-aesculap.ch@bbraun.com

6 | Lagerung



Knochenstanzen in geschlossener Stellung in einem Siebkorb oder alternativ im SQ.line® KERRISON Rack (JF125R oder JF126R) lagern.

7 | Sterilisation



Bitte die Gebrauchsanweisung (TA018250) beachten.

<https://eifu.bbbaun.com/eIFU/TA018250>