



# ProSet Bestseller

INFUSIONSTHERAPIE

# Standards aus dem Bereich der Infusionstherapie



## PROSET BESTSELLER – ERFAHRUNG IST UNSERE STÄRKE!

- Etwa **6 Millionen klinische Interventionen** werden jährlich mit unseren kundenspezifischen Sets durchgeführt
- Über **1'000 Kunden** (darunter Uni-Spitäler, Lehr-Spitäler und Maximalversorger) europaweit vertrauen unseren hohen Qualitätsstandards und arbeiten mit dem System «ProSet».
- Wir verstehen uns als Systemanbieter und bieten diese Produkte in folgenden drei Produktbereichen an:
  - Regionalanästhesie
  - Zentrale Venenkatheter
  - Komplexe Infusionstherapie



In dieser Broschüre haben wir die gefragtesten Sets aus dem Bereich der Infusionstherapie für Sie dargestellt. Jedes dieser Bestseller-Sets hat sich im Einsatz bei einer Vielzahl von Anwendern bewährt!

PROSET – WIR SETZEN STANDARDS!

# Mögliche Bestandteile eines ProSets

## Intrafix® SafeSet Infusionsbesteck

- Mit AirStop Filter zum Schutz vor dem Leerlaufen
- PrimeStop Schutzkappe ermöglicht eine automatische Befüllung und schützt vor Kontaminationen
- Scharfer Einstechdorn mit hervorragender Haltekraft
- Transparentes Schlauchmaterial ohne DEHP

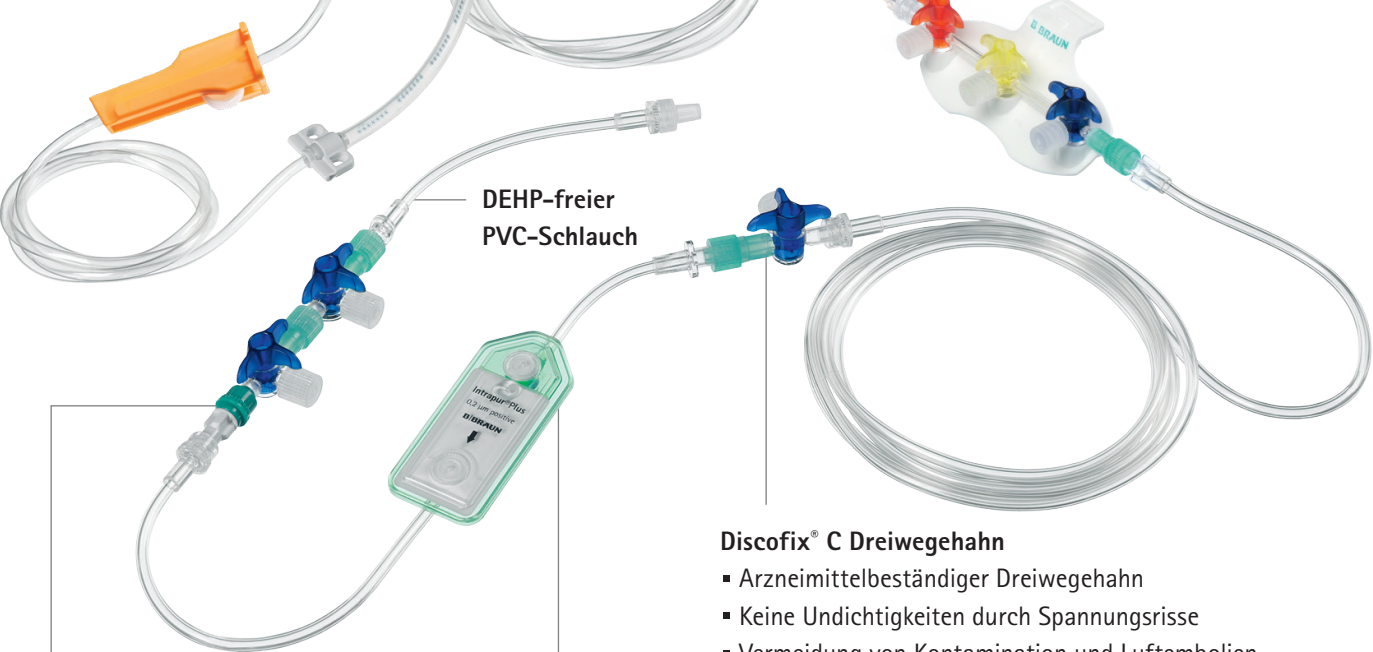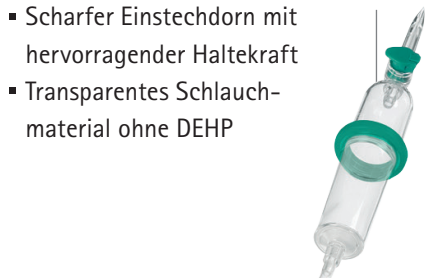

DEHP-freier  
PVC-Schlauch

## Rückschlagventil

- Bietet mehr Sicherheit bei der parallelen Anwendung von Schwerkraft- und Druckinfusionen
- Keine retrograde Förderung bei der Applikation von Medikamenten über den Discifix® C Dreiwegehahn

## Intrapur® Plus 0.2 µm Infusionsfilter


- Retention von Partikeln, Bakterien und Endotoxinen
- Standzeit bis zu 96 Stunden
- Lageunabhängige Luftabscheidung

## Discifix® C Hahnbank

- Arzneimittelbeständige Hahnbänke (3- und 5-fach)
- Undichtigkeiten durch Spannungsrisse, Kontaminationen und Luftembolien werden verhindert
- Spürbare Einrastung und exakte Positionierung der einzelnen Küken in 45 Grad Positionen

## Discifix® C Dreiwegehahn


- Arzneimittelbeständiger Dreiwegehahn
- Keine Undichtigkeiten durch Spannungsrisse
- Vermeidung von Kontamination und Luftembolien
- Problemloser Zugang durch den Rotationsadapter bei Injektionen und Aspirationen

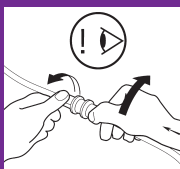


## Nachziehen aller Lock-Verbindungen in ProSets (Anwenderinformation)

Durch Lagerung, Transport und Sterilisation können sich vorkonnectierte Verbindungen gelockert haben, deshalb ist es erforderlich, dass vor Benutzung des Infusions-Regime die Lock-Verbindungen manuell nachgezogen werden (gängige Praxis). Das Piktogramm ist auf die Einzelverpackung und auf das Kartonetikett aufgedruckt.


# ProSet Intrafix® SafeSet

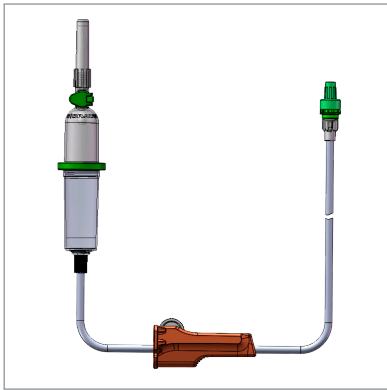

Art.-Nr.: 4189582 / Pharmacode 7532013	Stk.
Tropfkammer mit AirStop-Membran	1
230 cm DEHP-freier PVC-Schlauch (3 x 4.1 mm)	1
Rückschlagventil	1
PrimeStop-Kappe	1

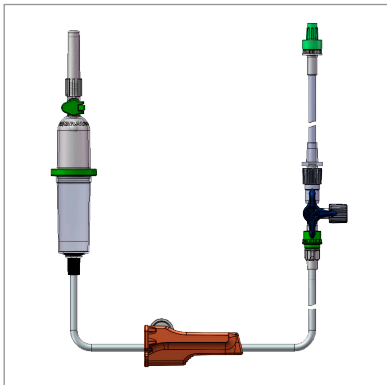

Art.-Nr.: 4188136 / Pharmacode 4759928	Stk.
Tropfkammer mit AirStop-Membran	1
180 cm DEHP-freier PVC Schlauch (3 x 4.1 mm)	1
Rückschlagventil	1
Discifix® C blau	1
15 cm Verlängerung (2 x 4.1 mm)	1
PrimeStop-Kappe	1

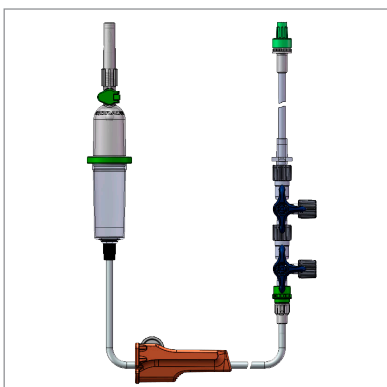


Art.-Nr.: 4188110 / Pharmacode 5418336	Stk.
Tropfkammer mit AirStop-Membran	1
180 cm DEHP-freier PVC Schlauch (3 x 4.1 mm)	1
Rückschlagventil	1
Discifix® C blau	2
10 cm Verlängerung (2 x 4.1 mm)	1
PrimeStop-Kappe	1






Art.-Nr.: 4188114 / Pharmacode 7530236	Stk.
Tropfkammer mit AirStop-Membran	1
180 cm DEHP-freier PVC-Schlauch (3 x 4.1 mm)	1
Rückschlagventil	1
Discofix® C blau	3
10 cm Verlängerung (2 x 4.1 mm)	1
PrimeStop-Kappe	1

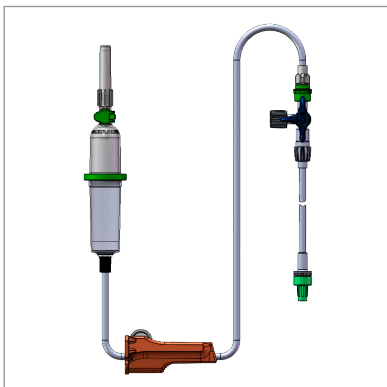


Art.-Nr.: 4188140 / Pharmacode 5327332	Stk.
Tropfkammer mit AirStop-Membran	1
230 cm DEHP-freier PVC-Schlauch (3 x 4.1 mm)	1
Rückschlagventil	1
Discofix® C blau	1
25 cm Verlängerung (2 x 4.1 mm)	1
PrimeStop-Kappe	1

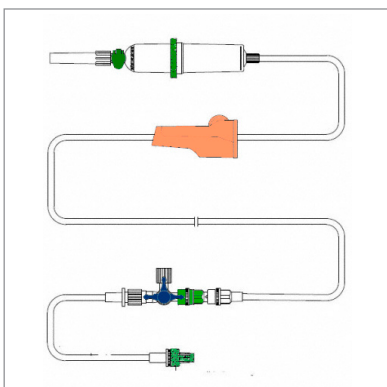


Art.-Nr.: 4183455 / Pharmacode 7532042	Stk.
Tropfkammer mit AirStop-Membran	1
230 cm DEHP-freier PVC-Schlauch (3 x 4.1 mm)	1
Rückschlagventil	1
Discofix® C blau	1
10 cm Verlängerung (2 x 4.1 mm)	1
PrimeStop-Kappe	1

Dreiweghahn und Rückschlagventil sind herausnehmbar


# ProSet Intrafix® SafeSet

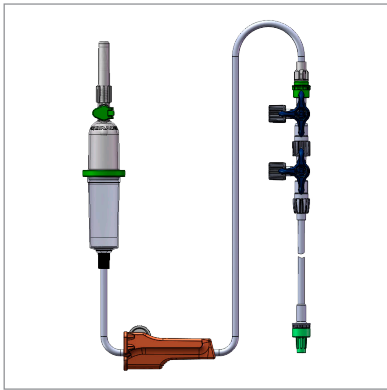

Art.-Nr.: 4188120/Pharmacode 4936951		Stk.
Tropfkammer mit AirStop-Membran		1
230 cm DEHP-freier PVC-Schlauch (3 x 4.1 mm)		1
Rückschlagventil		1
Discifix® C blau		2
25 cm Verlängerung (2 x 4.1 mm)		1
PrimeStop-Kappe		1

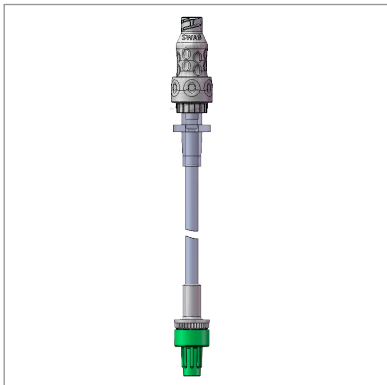


Art.-Nr.: 4182180/Pharmacode 7532059		Stk.
Caresite®		1
15 cm Verlängerung (2 x 4.1 mm)		1
PrimeStop-Kappe		1

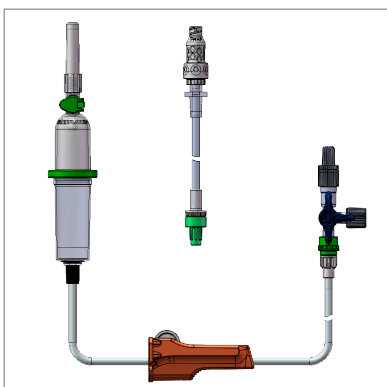


Art.-Nr.: 4182179/Pharmacode 6473113		Stk.
Teil 1	Tropfkammer mit AirStop-Membran	1
	180 cm DEHP-freier PVC-Schlauch (3 x 4.1 mm)	1
	Rückschlagventil	1
	Discifix® C blau	1
Teil 2	Caresite®	1
	15 cm Verlängerung (2 x 4.1 mm)	1
	PrimeStop-Kappe	1


# ProSet Intrafix® Primeline

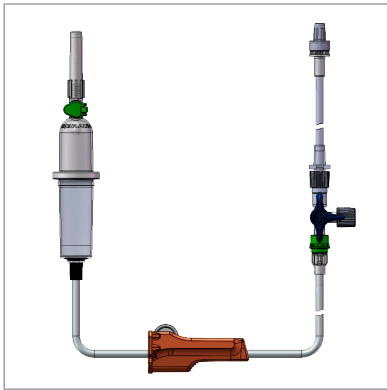

Art.-Nr.: 4182111 / Pharmacode 6272923	Stk.
Tropfkammer	1
180 cm DEHP-freier PVC-Schlauch (3 x 4.1 mm)	1
Rückschlagventil	1
Discofix® C blau	1
15 cm Verlängerung (2 x 4.1 mm)	1

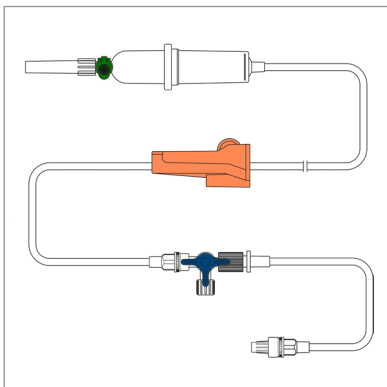


Art.-Nr.: 4180119 / Pharmacode 2262394	Stk.
Tropfkammer	1
180 cm DEHP-freier PVC-Schlauch (3 x 4.1 mm)	1
Discofix® C blau	1
15 cm Verlängerung (3 x 4.1 mm)	1

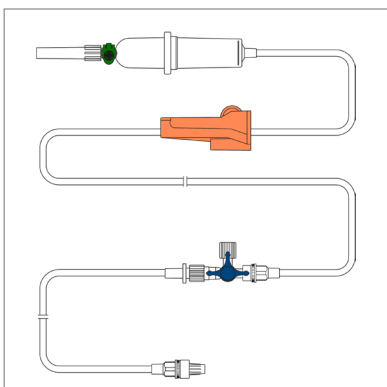

Art.-Nr.: 4187105 / Pharmacode 2028735	Stk.
Tropfkammer	1
180 cm DEHP-freier PVC-Schlauch (3 x 4.1 mm)	1
Discofix® C blau	1
30 cm Verlängerung (3 x 4.1 mm)	1

# Der Weichmacher\*

## DEHP-FREIE INFUSIONSLEITUNGEN

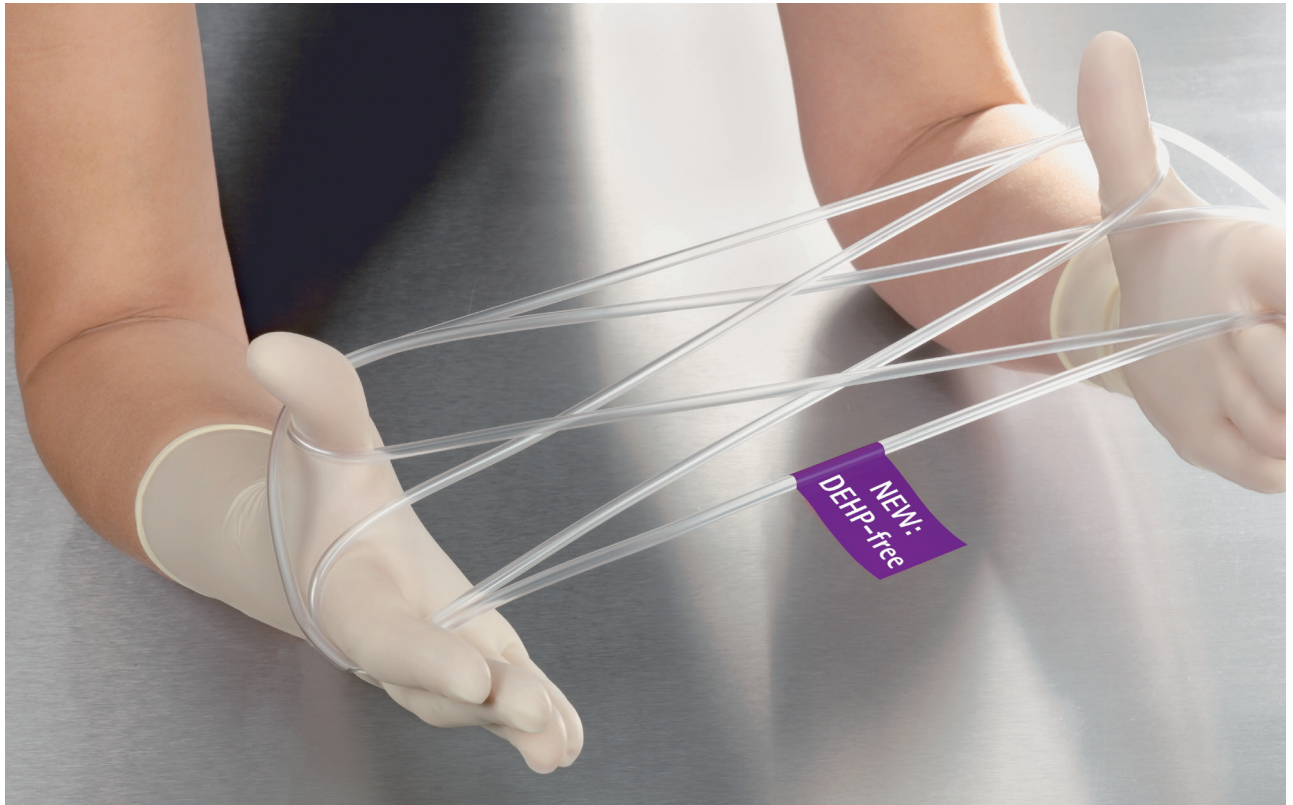

### Anwendungsvorteile des neuen, als unbedenklich eingestuftes Weichmachers DEHT

#### (DOTP = Di-(2-ethylhexyl)-Terephthalat:

- Keine Reproduktionstoxizität entsprechend SCENIHR\*\* der Europäischen Kommission
- Umfangreiche Sicherheitsdokumentation
- Nicht Bestandteil von Negativ-Listen der Gesundheitsämter
- DEHT-Eastman™ 168: ein seit über 35 Jahren verwendeter Weichmacher in verschiedenen Bereichen
- 54% weniger Auswaschung von Weichmachern (mit 10% Fettlösungen)
- TÜV-Zertifikat für die Verwendung in Volumetrischen Infusionspumpen

\* Betrifft ausschliesslich PVC-haltige Infusionsbestecke; Produkte vom Neutrapur-Typ (Polyurethan) enthalten keine Weichmacher

\*\* SCENIHR – Scientific Committee on Emerging and Newly-Identified Health Risks

B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)  
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | [sales-hospital.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-hospital.bbmch@bbraun.com)  
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | [sales-opm.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-opm.bbmch@bbraun.com)